



# Patron pour masque en tissu

Nous avons besoin de votre aide pour créer un stock de masques pour les **PROFESSIONNELS NON SOIGNANTS** de l'hôpital et préserver notre stock de masques chirurgicaux pour les soignants.



- Cette demande n'est **pas un appel au port de masque par la population.**
- Ce type de masque **ne remplace en aucun cas les précautions édictées** par le Ministère de la Santé (se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre, etc...) et ne saurait dispenser des règles de confinement.
- L'efficacité de ce type de masque ne peut être certifiée à ce jour en l'absence d'étude.

## Matériel nécessaire :

- Chutes de tissu en coton (environ 20 cm) pour l'extérieur et la doublure intérieure
- Molleton fin ou polaire fine
- Elastique souple (2 X 30 cm)

Le masque de soins est composé de 2 couches de tissu en coton et 1 couche de molleton.

**Le patron se trouve en dernière page.**



## Pas à pas :

- **Tissu extérieur**

Découper le patron à la taille souhaitée.

Découper les pièces de tissu en coton nécessaires en respectant 1/2 cm autour du patron sauf sur le côté «oreille» (conserver 2 cm)

**Nous obtenons 2 pièces de tissu**



- **Doublure intérieure**

2

Répéter la même opération que pour le tissu principal, à l'exception de la prise de couture côté «oreille».

**Nous obtenons 2 pièces de doublure intérieure**

- **Réaliser la même opération avec le molleton mais à la taille exacte du patron.**  
**Le molleton doit être plus petit pour être glissé entre le tissu extérieur et la doublure intérieure à l'étape 4.**



- Rassembler 2 des pièces de tissu extérieur endroit contre endroit et coudre la partie arrondie.

3

Faire de même avec la doublure intérieure

On obtient ce résultat

(Schéma A)



- Réaliser le même assemblage avec le molleton

4

- Assembler les 2 pièces de tissu obtenues (Schéma A) endroit contre endroit

**Coudre uniquement en haut et en bas**  
**Ne pas coudre les petits côtés.**

- **Puis retourner l'ensemble sur l'endroit et insérer le molleton.**



5

- Surpiquer la couture centrale (verticale)

Puis surpiquer le haut et le bas à quelques millimètres du bord afin que le molleton soit cousu avec les deux autres pièces de tissu.



Voilà à quoi cela ressemble de l'intérieur à ce stade.  
Le tissu principal extérieur est plus long que le morceau de doublure intérieure.  
Ce sera la coulisse pour la bande élastique.

6

- Plier et repasser ce surplus de tissu coté «oreille»


Coudre à la verticale, à quelques millimètres du pli, afin de créer une coulisse.

Passer ensuite un élastique de 30 cm dans la coulisse, nouer et glisser le noeud dans la coulisse pour plus de confort.



Le masque se lave à 30°C. Un entretien quotidien est recommandé.

**Par respect des droits d'auteur, la source des images utilisées dans le tutoriel ci-dessous est : <https://www.craftpassion.com/>**

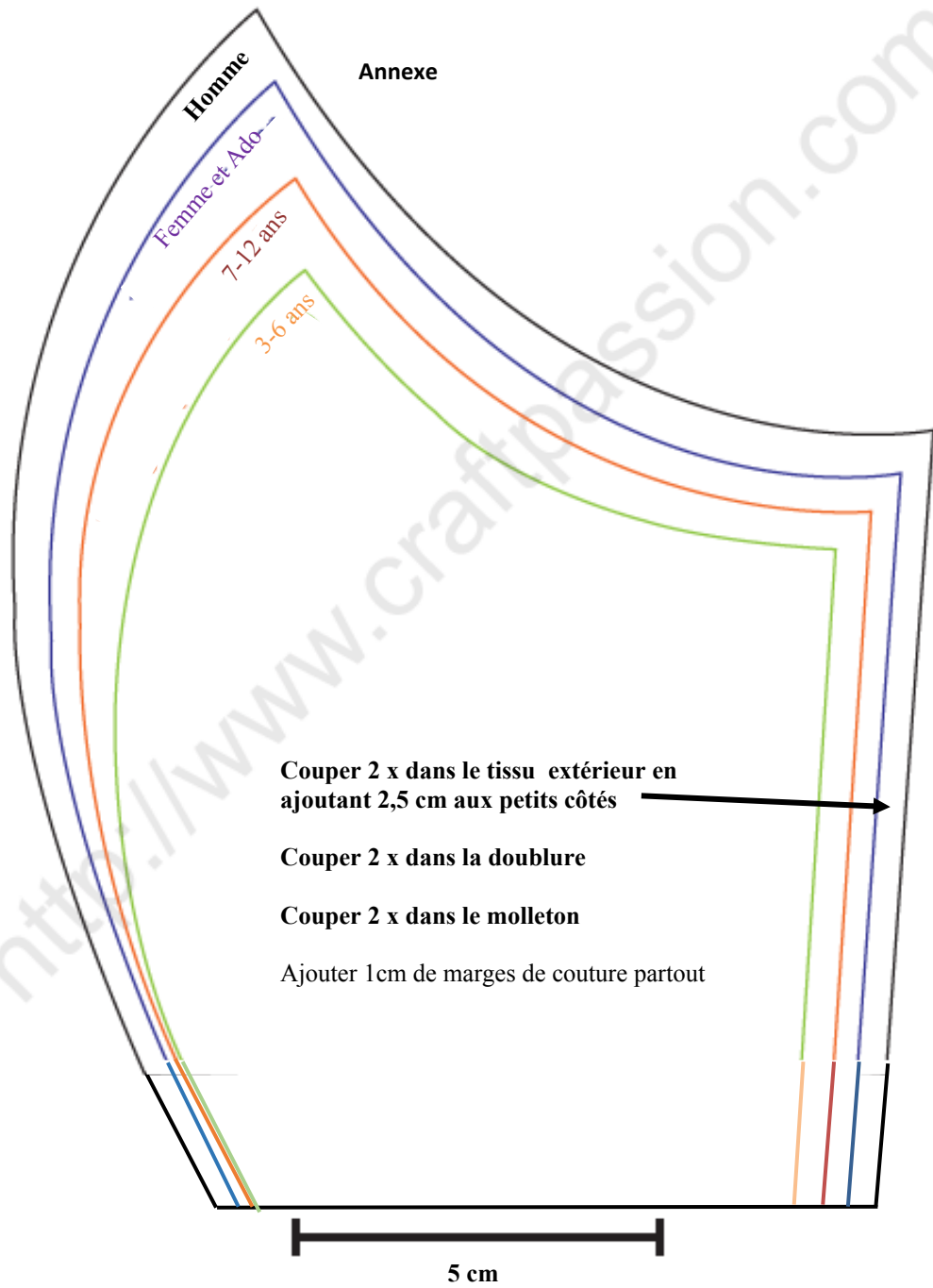

Mesurer ce segment avant de découper le patron